

Viera™

Breast ultrasound von **Clarius®**

Kurzanleitung

HOLOGIC®

 **clarius** ultrasound
anywhere



Technischer Support über:
**Kontaktieren Sie den Technischen
Support von Hologic**



Im Benutzerhandbuch zum Viera Ultrasound
Scanner finden Sie vollständige Anleitungen, ein
Glossar der Symbole und Sicherheitshinweise.


1 Die Clarius-App können Sie aus dem App Store oder dem Google Play Store herunterladen



2 Starten Sie die Clarius App



3 Konto erstellen

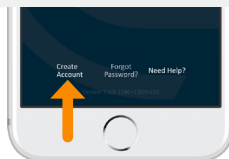

i Falls Sie bereits über ein Konto verfügen, melden Sie sich über Ihr bestehendes Konto an.


4 Legen Sie den Akku ein

Nachdem die Clarius App auf Ihr Smartphone oder Tablet geladen wurde, nehmen Sie den Akkuschutz ab, und legen Sie den Akku vollständig ein. Die Anzeige des Ultraschallgeräts blinkt zunächst blau, dann grün und geht schließlich aus. Das Ultraschallgerät befindet sich im Standby-Modus und wartet darauf, dass die App gestartet wird.



5 Ultraschallgerät finden

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Internet verbunden ist. Es dauert etwa eine Minute bis das Ultraschallgerät, das Sie verwenden möchten, in der App angezeigt wird.

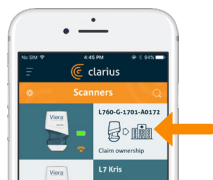

6 Institution erstellen oder auswählen

Sobald Sie Ihr Ultraschallgerät gefunden haben, werden Sie von der App aufgefordert, eine neue Institution zu erstellen oder eine Institution auszuwählen, die bereits mit Ihrem Konto verbunden ist.



7 Ultraschallgerät auswählen


Wählen Sie Ihr neues Ultraschallgerät aus der Liste.



8

Achten Sie auf die Verbindungsanzeige

Nach Abschluss des Verbindungsaufbaus ist die Clarius App mit dem Ultraschallgerät verbunden.

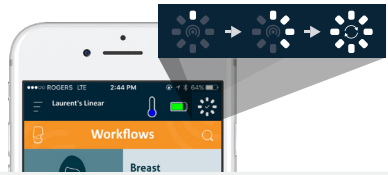

9

Wechseln Sie auf das Wi-Fi Direct Netzwerk des Ultraschallgeräts


Nach der Erstinbetriebnahme verbindet sich Ihr Viera Ultraschallgerät bei jedem Einsetzen des Akkus automatisch mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Um eine hohe Leistung zu erzielen, wird ein Smartphone oder Tablet empfohlen, das 5-GHz-WLAN unterstützt.

iOS*

iOS 11+ wird bei jedem Einschalten des Ultraschallgeräts eine Aufforderung anzeigen. Berühren Sie einfach die Schaltfläche „Beitreten“ und Ihr Ultraschallgerät stellt eine Verbindung her.

Android

Eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm und bestätigt die automatische Verbindung.

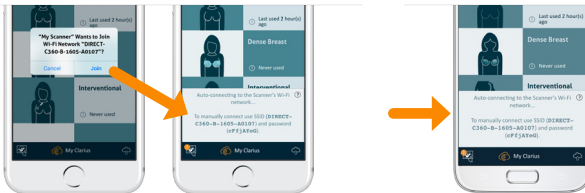

*HINWEIS: Nutzer von iOS 10 oder älteren Versionen müssen das manuelle Einstellungsverfahren verwenden, erläutert unter www.clarius.com/wifi. Das iPhone 4s unterstützt kein 5-GHz-WLAN.




Verbindungsprobleme? Versuchen Sie das hier erläuterte manuelle Einstellungsverfahren: www.clarius.com/wifi


10

Ultraschalluntersuchung starten

Wählen Sie den Untersuchungstyp aus der Liste

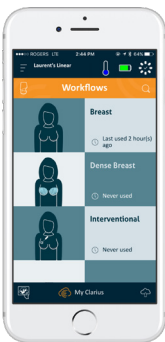

Geben Sie Angaben zum Patienten ein, oder fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort

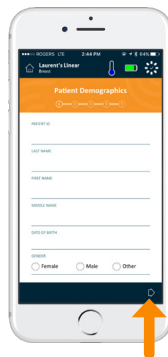

Drücken Sie die Schaltfläche mit der Schneeflocke für die Live-Bildgebung



Die Basisfunktionen für das Scannen finden Sie unter www.clarius.com/tutorials


Aktualisierungen herunterladen

Es kann sein, dass Sie vom System aufgefordert werden, die Software Ihres Ultraschallgeräts zu aktualisieren. Drücken Sie **Aktualisieren**, um fortzufahren.



Während einer Aktualisierung

Die Leuchte des Ultraschallgeräts blinkt zunächst blau und anschließend während der Aktualisierung der Software violett auf. **Trennen Sie während dieser Zeit nicht die Verbindung zum Akku.**

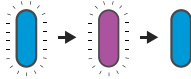

Oben rechts im Bildschirm erscheint eine violette Anzeige. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige des Ultraschallgeräts blau auf, und die Verbindung wird wieder automatisch wiederhergestellt.

i Nach der Aktualisierung kann eventuell Schritt 9 notwendig sein, um die Verbindung wieder herzustellen.

Tipps und Tricks

In unserer Wissensdatenbank finden Sie zahlreiche Tipps und Tricks zur Einrichtung und Nutzung des Viera Ultraschallgeräts und der Clarius Cloud.

www.clarius.com/faq

Unterstützte Geräte

Viera Ultraschallgeräte sind mit iOS- und Android-Geräten kompatibel. Eine Aufstellung der unterstützten Geräte finden Sie unter:

www.clarius.com/devices

Handbücher

Druckausgabe

Wenden Sie sich bitte an den Technischen Support von Hologic, falls Sie gerne eine kostenlose Druckausgabe des Benutzerhandbuchs zum Viera Ultrasound Scanner hätten oder Sie Fragen zu den Artikeln in der Verpackung haben sollten.

Digitale Version

Das aktuelle Benutzerhandbuch zum Viera Ultrasound Scanner finden Sie unter www.clarius.com/manuals. Laden Sie es für eine Anzeige auf ein beliebiges Gerät herunter.

Technischer Support von Hologic

Support-Zentrum USA

+1-877-371-4372
+1-781-999-7750
BreastHealth.Support@hologic.com

Support-Zentrum Europa

+32 2 711 4545
BE-Techsupport@hologic.com

Support-Zentrum Australien

+1-800-264073
+612-9888-8000
anz.service@hologic.com

Hergestellt für:

Hologic, Inc.

Unternehmenszentrale
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752 USA
Telefon: +1.508.263.2900
www.hologic.com

Hergestellt von:

Clarius Mobile Health

350-3605 Gilmore Way
Burnaby, BC, V5G4X5, Kanada
hello@clarius.com
Telefon: +1.778.800.9975
www.clarius.com



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die folgenden beiden Bedingungen müssen für den Betrieb gegeben sein: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung verursachen und (2) muss alle empfangene Störstrahlung, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb hervorruft, annehmen. Dieses Produkt hat elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) unter Bedingungen einschließlich der Verwendung von konformen Peripheriegeräten bewiesen. Es ist wichtig, dass Sie kompatible Peripheriegeräte verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass das Gerät die Funkkommunikation von Radios, Fernsehern und anderen elektronischen Geräten stört.

15-02-00095_Gedruckt in Kanada
11-041807-01c

Technischer Support über:
Kontaktieren Sie den Technischen Support von Hologic

Im Benutzerhandbuch zum Viera Ultrasound Scanner finden Sie vollständige Anleitungen, ein Glossar der Symbole und Sicherheitshinweise.