

Pikaopas



Tekninen tuki:
www.clarius.com/support



Clarius Ultrasound Scannerin käyttöohjeesta löydät täysimittaiset ohjeet, symbolien selitykset sekä turvallisuustiedot:
www.clarius.com/manuals


1 Lataa Clarius-sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta



2 Avaa Clarius-sovellus




3 Luo tili

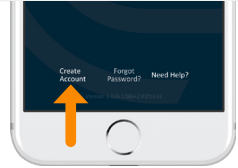

i Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään olemassa olevaan tiliisi.

4 Aseta akku laitteeseen

Kun olet ladannut Clarius-sovelluksen mobiililaitteellesi, poista akusta suojauska ja työnnä akku kunnolla paikoilleen. Skannerin valo välähtää ensin sinisenä, sitten vihreänä, ja sitten se sammuu; skanneri jää odottamaan sovelluksen käynnistymistä.

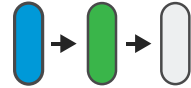

5 Merkitse skanneri

Varmista, että mobiililaitteesi on yhteydessä internetiin. Skanneri ilmestyy sovellukseen noin minuutin kuluessa.



6 Luo tai valitse yksikkö

Kun olet merkinnyt skannerin omaksesi, sovellus kehottaa sinua luomaan uuden yksikön tai valitsemaan jo tiliisi liitetyn yksikön.



7 Valitse skanneri


Valitse uusi skanneri listasta.



8

Katso yhteysympyrää

Kun ympyrä on täysi, Clarius-sovellus on yhdistynyt skanneriin.

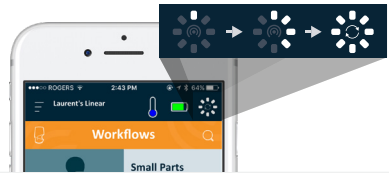


9

Liity skannerin Wi-Fi Direct -verkkoon

Alkuaikensa jälkeen Clarius Scanner yhdistyy automaattisesti mobiililaitteeseesi seuraavalla kerralla kun asetat skannerin akun paikoilleen. Suosittelemme käyttämään mobiililaitetta, joka tukee 5 GHz:n Wi-Fi-taajuutta.


iOS*

iOS 11+ näyttää ilmoituksen joka kerta, kun skanneri pannaan päälle. Valitse vain Liity, niin skanneri muodostaa yhteyden.

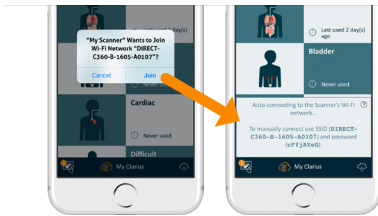

Android

Näytölle tulee ilmoitus automaattisesta yhdistymisestä.

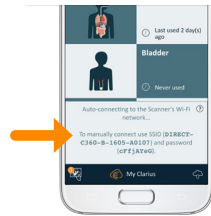

*HUOMAA: Jos sinulla on käytössäsi iOS 10 tai vanhempi, yhteys on muodostettava manuaalisesti. Löydät ohjeen osoitteesta www.clarius.com/wifi. iPhone 4S ei tue 5 GHz:n Wi-Fi-taajuutta.




Yhteysongelmia? Kokeile manuaalista yhteyden muodostamista, joka opastetaan täällä: www.clarius.com/wifi


10

Aloita skannaus

Valitse listasta tutkimuksen tyyppi

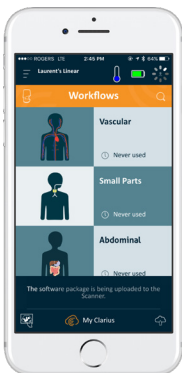

Syötä potilaan tiedot tai ohita kohta

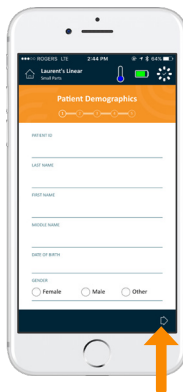


Paina lumihiualekuvaketta nähdäkseen reaaliaikaisen kuvan



Tutustu perusskannaustoimintoihin osoitteessa www.clarius.com/tutorials


Lataa päivitykset

Järjestelmä saattaa kehottaa sinua päivittämään skannerin ohjelmiston. Paina vain **Update**.

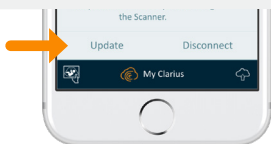

Päivityksen aikana

Skannerin valo vilkkuu ensin sinisenä ja ohjelmiston päivittymisen aikana purppurana. **Älä irrota laitteen akkua päivityksen aikana.**

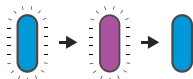

Purppura merkki näkyy myös sovelluksen oikeassa yläkulmassa. Kun päivitys on valmis, skannerin valo muuttuu siniseksi ja yhteys mobiililaitteeseen muodostuu automaattisesti uudelleen.



Saatat joutua toistamaan ohjeen 9. kohdan muodostaaksesi yhteyden päivityksen jälkeen.

Vinkkejä

Löydät helppokäyttöisestä tietämuskannastamme vinkkejä Clarius Scannerin ja Clarius Cloudin käyttöönottoon ja käyttöön.

www.clarius.com/faq

Tuetut laitteet

Clarius Scanner toimii iOS- ja Android-laitteiden kanssa. Löydät listan tällä hetkellä tuetuista laitteista seuraavasta osoitteesta:

www.clarius.com/devices

Käyttöohjeet

Paperiversio

Jos haluat ilmaisen paperiversion Clarius Ultrasound Scannerin käyttöohjeesta tai jos sinulla on kysyttävää pakkauksen sisällöstä, ota meihin yhteyttä osoitteessa: www.clarius.com/contact.

Digitaalinen versio

Viimeisin versio Clarius Ultrasound Scannerin käyttöohjeesta on saatavilla osoitteessa: www.clarius.com/manuals. Voit ladata käyttöohjeen käytettäväksi millä tahansa laitteella.



Clarius Mobile Health
350-3605 Gilmore Way
Burnaby, BC, V5G4X5, Canada
hello@clarius.com
Puhelin: +1.778.800.9975
www.clarius.com



Laitte täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen epätoivottua toimintaa. Tämä tuote on osoittanut EMC-vaatimustenmukaisuuden olosuhteissa, joissa käytettiin vaatimukset täyttäviä ohjeilaitteita. Jotta tuote aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriöitä radioille, televisioille ja muille sähkölaitteille, on tärkeää käyttää vaatimustenmukaisia ohjeilaitteita.



Tekninen tuki:
www.clarius.com/support



Clarius Ultrasound Scannerin käyttöohjeesta löydät täysimittaiset ohjeet, symbolien selitykset sekä turvallisuustiedot:
www.clarius.com/manuals