

Viera™

Breast ultrasound par **Clarius®**

Guide de démarrage rapide

HOLOGIC®

 **clarius** ultrasound
anywhere



Pour une assistance technique :
**Contactez l'assistance technique
Hologic**



Veillez lire le manuel d'utilisateur du Scanner
Viera Ultrasound pour les instructions complètes, le
glossaire des symboles et les informations de sécurité.


1 Téléchargement de Clarius App sur l'App Store ou le Google Play Store



2 Démarrage de Clarius App



3 Création d'un compte

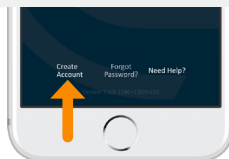

i Si vous avez déjà un compte, veuillez vous connecter avec votre compte existant.


4 Insertion de la batterie

Une fois que l'application Clarius App est chargée sur votre appareil intelligent, retirez l'onglet de protection de la batterie et insérez-la complètement. Le voyant du scanner clignote en bleu, puis en vert, puis s'éteint ; le scanner est en veille, en attendant le démarrage de l'application.



5 Revendication de votre scanner

Vérifiez que votre appareil intelligent est connecté à Internet. Votre scanner disponible pour la revendication prend environ une minute à apparaître dans l'application.

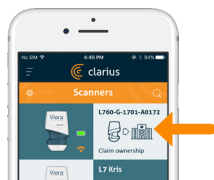


6 Création ou sélection d'un établissement

Une fois votre scanner revendiqué, l'application vous demande de créer un nouvel établissement ou de sélectionner un établissement déjà connecté à votre compte.



7 Sélection du scanner


Sélectionnez votre nouveau scanner dans la liste.

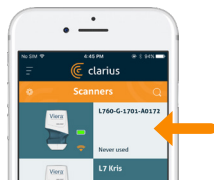

8

Vérification de la roue de connexion

L'application Clarius App est connectée au scanner lorsque la roue de statut est terminée.

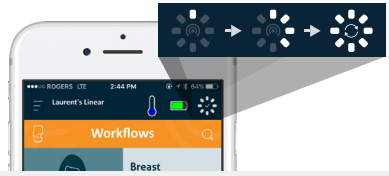

9

Passage au réseau Wi-Fi Direct du scanner


Une fois la configuration initiale effectuée, votre scanner Viera se connecte automatiquement à votre appareil intelligent à l'insertion suivante de la batterie. Pour une performance optimale, il est conseillé d'utiliser un appareil intelligent compatible avec le Wi-Fi 5 GHz.

iOS*

iOS 11 et versions ultérieures affiche un message à chaque démarrage du scanner. Il vous suffit de toucher le bouton Rejoindre pour que votre scanner se connecte.

Android

Un message s'affiche à l'écran pour confirmer la connexion automatique.

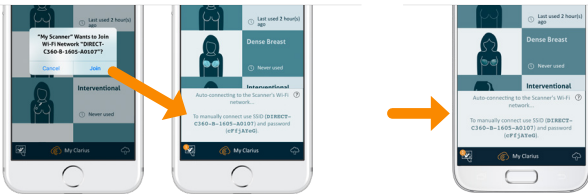

*REMARQUE : pour iOS 10 ou versions antérieures, les utilisateurs doivent suivre la méthode de configuration manuelle décrite sur www.clarius.com/wifi. L'iPhone 4s n'est compatible avec le Wi-Fi 5 GHz.



Problèmes de connexion ? Essayez la méthode de configuration manuelle décrite ici : www.clarius.com/wifi



10

Démarrage du scan

Sélectionnez le type d'examen dans la liste

Saisissez les données démographiques des patients ou passez à l'étape suivante


Appuyez sur le bouton en forme de flocon de neige pour afficher l'écran d'imagerie en temps réel

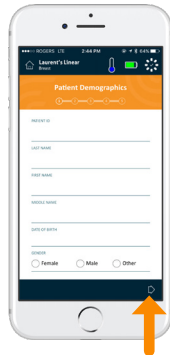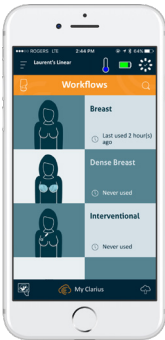

Découvrez les fonctions de scan de base sur www.clarius.com/tutorials


Téléchargement des mises à jour

Dans certains cas, le système vous demande de mettre le logiciel de votre Scanner à jour. Il vous suffit d'appuyer sur **Mise à jour** pour continuer.

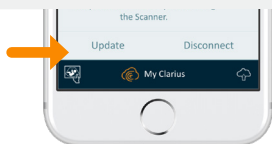

Pendant une mise à jour

Le voyant du scanner commence à clignoter en bleu, puis en violet pendant la mise à jour du logiciel. **Ne débranchez pas la batterie pendant la mise à jour.**

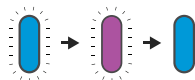

Un voyant violet s'affiche également en haut à droite de l'écran. Une fois la mise à jour terminée, le voyant du scanner devient bleu et la connexion se rétablit automatiquement.



Après la mise à jour, il se peut que vous deviez vous reporter à l'étape 9 pour rétablir la connexion.

Conseils pratiques

Effectuez une recherche facile dans notre base de connaissances pour découvrir des conseils pratiques sur la configuration et l'utilisation du scanner Viera et de Clarius Cloud.

www.clarius.com/faq

Appareils supportés

Le scanner Viera fonctionne avec les appareils iOS et Android. Pour consulter une liste des appareils actuellement supportés, veuillez visiter :

www.clarius.com/devices

Manuels

Copie imprimée

Pour obtenir une copie imprimée du manuel d'utilisateur du Scanner Viera Ultrasound sans frais supplémentaires, ou si vous avez des questions sur l'un des éléments du paquet, veuillez contacter le support technique Hologic.

Copie numérique

La dernière version du manuel d'utilisateur du Scanner Viera Ultrasound est disponible sur www.clarius.com/manuals. Téléchargez-la pour la visualiser sur n'importe quel appareil.

Assistance technique Hologic

Centre d'assistance aux États-Unis

+1-877-371-4372

+1-781-999-7750

BreastHealth.Support@hologic.com

Centre d'assistance en Europe

+32 2 711 4545

BE-Techsupport@hologic.com

Centre d'assistance en Australie

+1-800-264073

+612-9888-8000

anz.service@hologic.com

Fabriqué pour :

Hologic, Inc.

Siège principal

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752 États-Unis

Téléphone : +1.508.263.2900

www.hologic.com

Fabriqué par :

Clarius Mobile Health

350-3605 Gilmore Way

Burnaby, BC, V5G4X5, Canada

hello@clarius.com

Téléphone : +1.778.800.9975

www.clarius.com



Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement. Ce produit a prouvé sa conformité à la directive CEM dans des conditions comprenant l'utilisation de périphériques conformes. Il est important que vous utilisiez des périphériques conformes afin de réduire la possibilité de provoquer une interférence avec les radios, les télévisions et les autres appareils électroniques.



Pour une assistance technique :
Contactez l'assistance technique Hologic



Veuillez lire le manuel d'utilisateur du Scanner Viera Ultrasound pour les instructions complètes, le glossaire des symboles et les informations de sécurité.